

Ito ay isang tabinik at masipog na compressor sebhulizer. Nag-aalok ito ng mas mataas na daloy ng litro, mas mabilis na paggamot at mas mababagong antas ng bilang kanya sa maraming iba pang mga sebhulizer ng compressor ng ekonomiya.

Detaladong Paglalarawan:

Ang saluang compact na disenyo ay ginagawa nang labhang portable.
Ang makapagpapaligang pinag-pang ay mabagal na magsalubok at tabinik.
Naghalalid ng pare-parehong laki ng duct sa 25 micron at mabilis na oras ng paggamot.



Angkop para sa iba't ibang Sitwasyon



PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER


Penetrate into Bronchus & Lung $2\text{--}5\mu\text{m}$



Adults & Children

MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: $3.6 - 4.0 \mu\text{m}$

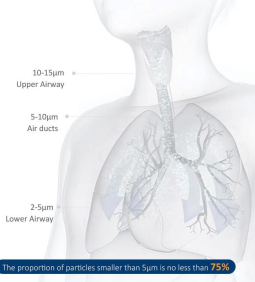

The proportion of particles smaller than $5\mu\text{m}$ is no less than **75%**


QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep




1. Nebulizer machine
 2. Medicine cup
 3. Air tube
 4. Adult mask
 5. Child mask
 6. Mouthpiece
 7. Elastic strap
-

USE BASIC STEPS

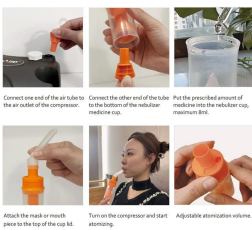

Connect one end of the air tube to the air outlet of the compressor. Connect the other end of the tube to the bottom of the nebulizer medicine cup. Put the proximal amount of medicine into the nebulizer cup, maximum 8ml. Attach the mask or mouth piece to the top of the cup lid. Turn on the compressor and start atomizing. Adjustable atomization volume.


Higit pang mga detalye

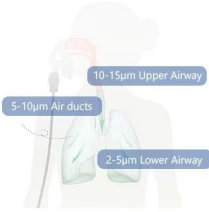

Micron level nebulization—2µm-5µm
Ang mga solusiyong naipartikula ay dinadagang masasabit sa upper respiratory tract, trachea, at/mula sa lower respiratory tract, sa ginagamang mga malaking magsalagapang ang ganitong.



Makans sa kaharapan sa atomization
Makans sa atomization para sa higit-higit na operasyon.

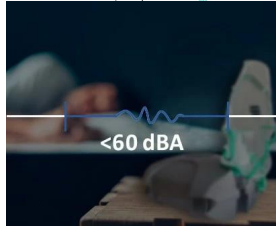

Mababang dinatay ng inap
Mababang dinatay ng inap, mababang pangpapang ng inap, baby atomization ng inap, atomization.